

Kit rápido de antígenos SARS-CoV-2 de Watmind

Ensayo de punto
de atención seguro
y práctico



Kit rápido de antígenos del SARS-CoV-2 fiable y coste efectivo

La solución ideal para resultados rápido y cualitativos en pacientes con desarrollo de síntomas entre los 0-7 primeros días

Beneficios claves


- ✓ Para uso profesional en el punto de atención
- ✓ Incluye todo el material de recogida de muestra y material necesario para hacer la prueba
- ✓ Uso en muestra naso/orofaríngea y saliva
- ✓ Resultados rápidos en 10 minutos
- ✓ Tubos de mezcla con tampón de extracción en un único paso
- ✓ Disponibilidad de material de control opcional
- ✓ Inmunoensayo basado en la tecnología del oro coloidal



Especificaciones*

Test	
Tecnología	Inmunoensayo tipo sándwich de flujo lateral
Tipo de muestra	Saliva, nasofaríngea, orofaríngea
Volumen de tampón	26 x 500 µL (tubo de mezcla y tampón de extracción listos para su uso)
Volumen de muestra	100 µL (3 gotas) / test
Sensibilidad	Muestra naso/orofaríngea: 87,0% (Valor Ct de RT-PCR ≤ 36); 95,15% (≤ 7 días de desarrollo de los síntomas) Muestra de saliva: 90,45% (Valor Ct de RT-PCR ≤ 36); 95,51% (≤ 7 días de desarrollo de los síntomas)
Especificidad	Muestra naso/orofaríngea: 99,12% Muestra de saliva: 99,45%
Especificaciones de embalaje	25 test/kit

* Más detalles en la IFU del producto.

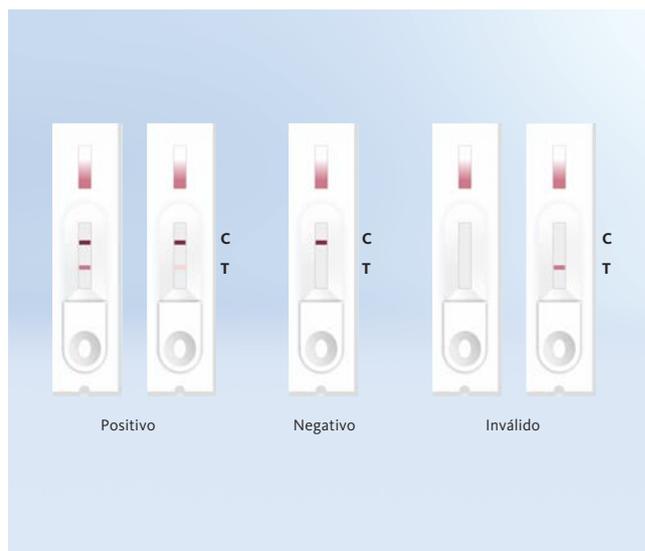

Distribuidor España: Sysmex España S.L.
Frederic Mompou, 4B Planta 2, 08960 - Sant Just Desvern, España - Teléfono +34 902 09 05 52 - Fax +34 902 09 02 88 - info@sysmex.es - www.sysmex.es

Fabricante: Shenzhen Watmind Medical Co., Ltd.
Room 108, Shenzhen IC Design & Application Industrial Park Nr 1089, Chaguang Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Encontrará la dirección de su delegación local de Sysmex en el enlace www.sysmex-europe.com/contacts